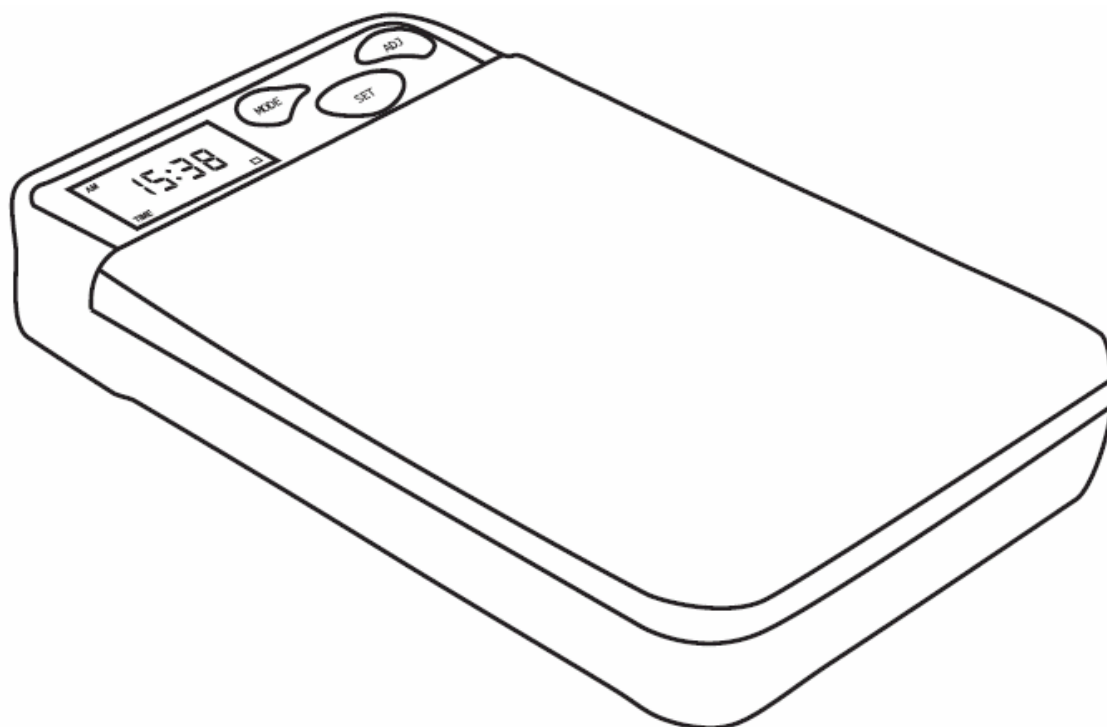


CAIXA PARA REMÉDIO COM ALARME

Modelo: 201



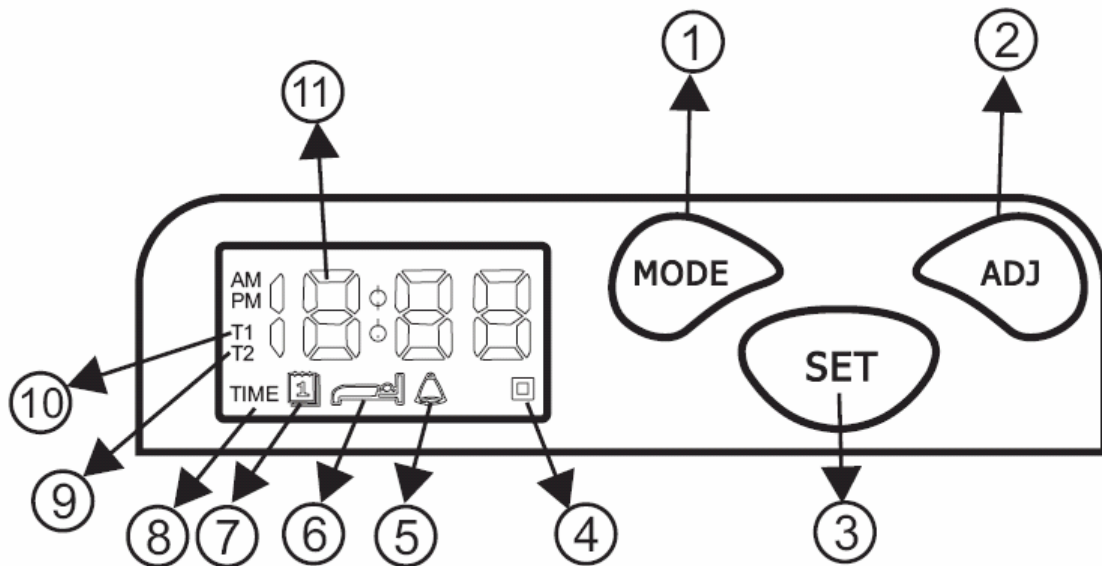
MANUAL DE INSTRUÇÃO

PARABÉNS

Você adquiriu a mais eficaz Caixa para Remédio com Alarme disponível no mercado. A Caixa para Remédio com Alarme foi projetada para acordar você para tomar seu remédio, lembra-lo de tomar seus remédios em intervalos de tempo.

CARACTERÍSTICAS

- Múltiplos compartimentos para remédio para cada dia ou diferentes remédios.
- Visor de LCD para indicar a hora e alarme
- Som e visual do bip do alarme.
- Função de despertar quando você estiver nas atividades diárias.
- T1 e T2 com a opção de dois intervalos de tempo.
- Caixa para Remédio anti-umidade.
- Energia com uma pilha “AAA” 1,5V DC



1. Tecla modo
2. Tecla de ajuste
3. Tecla de configuração
4. Ícone do alarme desativado
5. Ícone do alarme
6. Ícone da hora de dormir
7. Ícone do primeiro alarme
8. “Time” indica o modo da hora
9. T2 intervalo do alarme
10. T1 intervalo do alarme
11. Hora no visor

COLOCAR E TROCAR A PILHA

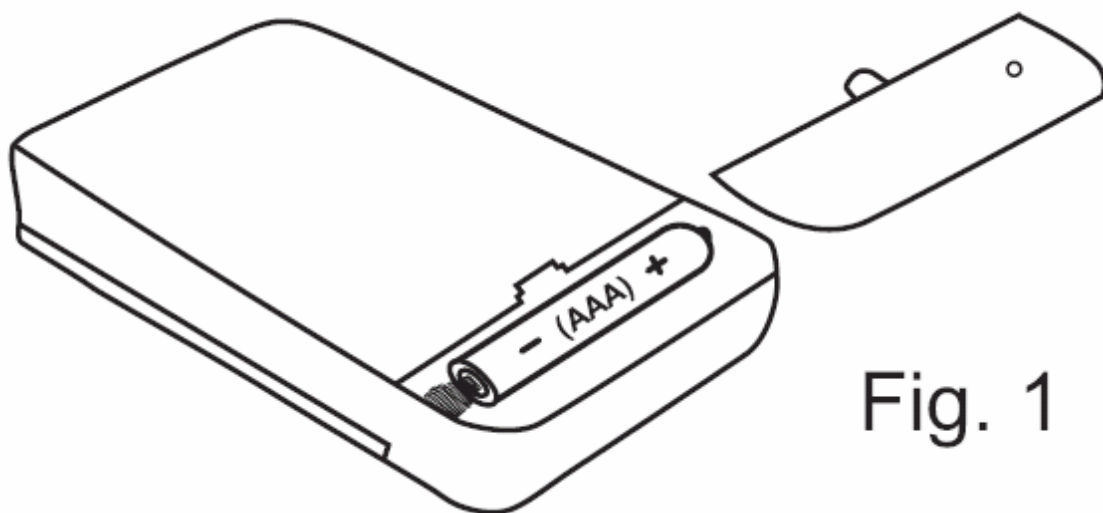


Fig. 1

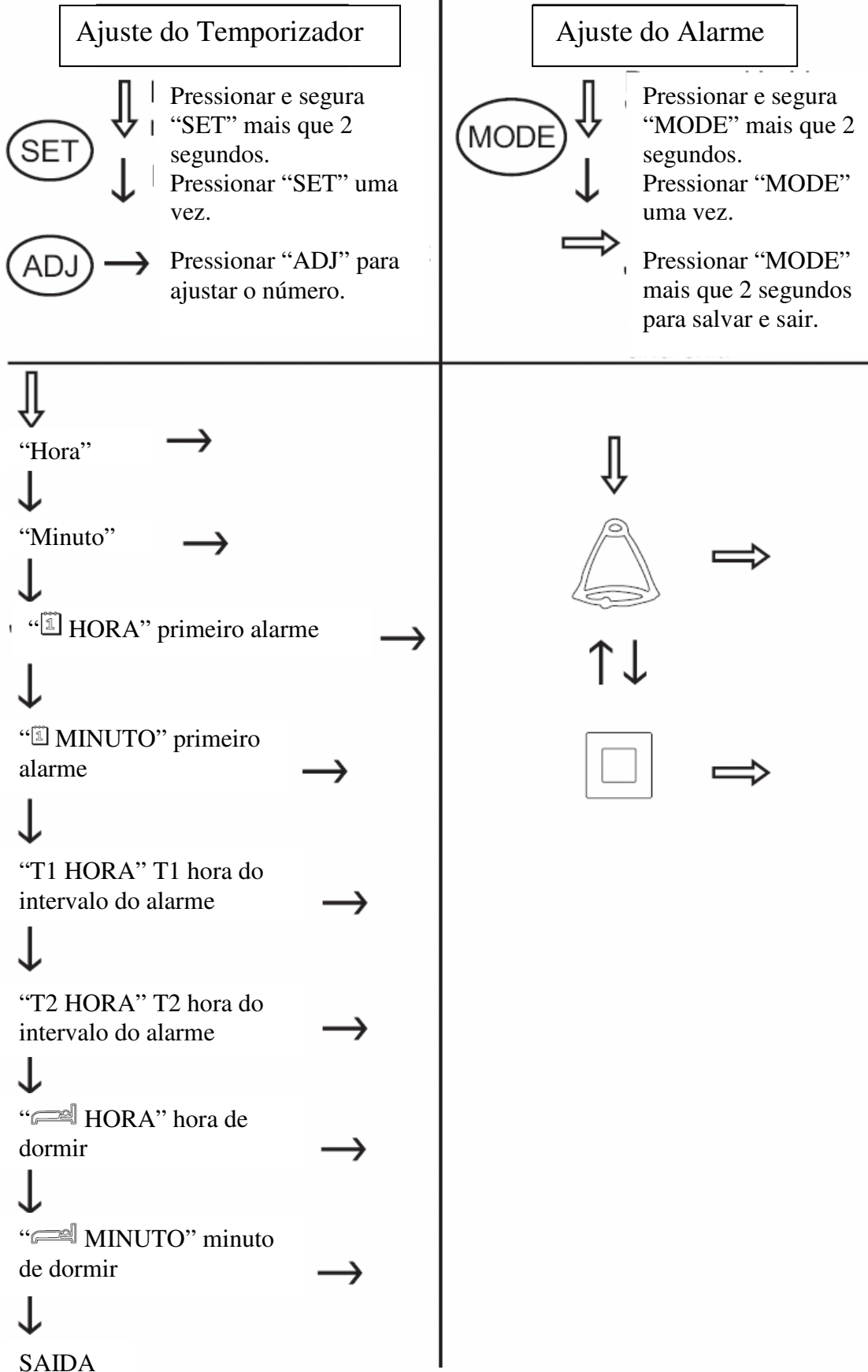
1. Abra a tampa da pilha
2. Insira uma pilha “AAA” como apresentado na Fig.1. Assegure-se de que a polaridade esteja de acordo com a indicada no compartimento.
3. Recoloque a tampa da pilha.
4. Quando o alarme estiver fraco ou o visor do LCD apagado troque a pilha por uma nova.

AJUSTANDO O TEMPORIZADOR E ALARME


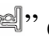
Quando for usado pela primeira vez ou trocar a pilha, ele entra automaticamente no modo de ajuste.

A seguir um seqüencial de ajuste rápido e procedimento.




QUADRO SEQUENCIAL DO AJUSTE RÁPIDO




PROCEDIMENTO DO AJUSTE DO ALARME

1. Pressione e segure a tecla “SET” até que o número da hora pisque, agora está na condição modo de ajuste. (Se não houver nenhuma alteração dentro de 30 segundos ele volta ao modo de hora).
2. Pressione a tecla “ADJ” para acertar a hora do dia com AM ou PM.
3. Pressione a tecla “SET” o dígito piscará para trocar para “Minutos”.
4. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar o “Minutos” do relógio.
5. Pressione a tecla “SET” e o ícone “1” e “Hora” piscará para ajustar o despertador para o primeiro horário para tomar o remédio.
6. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar a “Hora” desejada com AM e PM.
7. Pressione a tecla “SET” os ícones “1” e “Minuto” piscarão.
8. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar os “Minutos” desejados (É aumentado 10 minutos a cada vez que apertar a tecla).
9. Pressione a tecla “SET” os ícones “T1” e “Hora” piscarão para inicialmente ajustar o intervalo do alarme.
10. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar o intervalo “T1” desejado de 1 até 12 horas.
11. Pressione a tecla “SET” e os ícones “T2” e “Hora” irão piscar para ajustar o segundo intervalo do alarme. (Se você não precisar do segundo intervalo de tempo simplesmente pule esta etapa (12), pressione “SET” outra vez e mantenha a hora em “00” para não ativar o alarme T2).
12. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar o intervalo “T2” a partir de 1 até 12 horas.
13. Pressione a tecla “SET” e os ícones  e “Hora” irão piscar para ajustar a hora de dormir. (ex. ao dormir o alarme está desarmado até o próximo dia no primeiro alarme).
14. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar o desarme “Hora” com o “AM” ou “PM” correto.
15. Pressionar a tecla “SET” o ícone  e “Minuto” piscarão.
16. Pressione a tecla “ADJ” para ajustar o desarme da função dormir “Minuto”. (Aumenta em 10 minutos a cada vez que apertar a tecla)
17. Pressione a tecla “SET” após completar o ajuste e para sair do modo hora.

PROCEDIMENTO DO AJUSTE DO ALARME

1. Pressione e segure a tecla “MODE” até o ícone “” piscar para entrar no modo ajuste. (Se não houver nenhuma entrada dentro de 30 segundos ele volta no modo hora).
2. Pressione a tecla “MODE” para selecionar um alarme conforme segue:
“”(alarme) ou “” (desarmado).
3. Pressione e segure a tecla “MODE” até o ícone parar de piscar para sair do modo de ajuste do alarme.

NOTA:

1. Quando o alarme disparar você pode pressionar a tecla “MODE” para parar, mas o ícone T1 ou T2 continuaram piscando até 30 minutos para lembrá-lo qual o intervalo de tempo que está programado para despertar. Durante o período que o lembrete visual estiver piscando toda e qualquer função de ajuste fica bloqueada.
2. O ícone “” o alarme está totalmente inativado, devem ser ajustado para o modo alarme para ativar a função alarme.

MODO DESATIVAÇÃO

O modo de desativado é ajustado a caixa de remédio para economizar energia, enquanto você não estiver usando a caixa de remédio.

* Pressione e segure a tecla “ADJ” até que o visor de LCD desligue para entrar no modo de descanso.

PROGRAMAR O MODO DE REATIVAÇÃO

* Pressionar e segurar a tecla “SET” até que o visor de LCD ligue até que a “Hora” apareça piscando e reativar o aparelho.

Favor seguir o “Ajuste do Temporizador” e “Ajuste Alarme” para reajustar a hora e o alarme.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem de operação: Uma pilha “AAA” 1,5V DC

Tempo de alarme: Bip de 60 seg. e indicador visual de 30 minutos.

Tipo de material: Polipropileno.

GARANTIA

A Controller Comércio e Serviços Ltda. dá a seguinte garantia ao comprador original do equipamento:

1) A Controller Comércio e Serviços Ltda garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação. Falhas do equipamento devido a utilização em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta Garantia.

2) Esta Garantia não inclui as pilhas.

3) Não desmonte o equipamento. Isso cancelará a garantia e fará o equipamento exibir falsos resultados.

4) Se a Controller Comércio e Serviços Ltda. receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente.

5) Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Controller Comércio e Serviços Ltda para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a Controller Comércio e Serviços Ltda ou ao canal de venda autorizado.

6) O aparelho com defeito deverá ser enviado para a Controller ou para uma das assistências técnicas autorizadas (veja a relação em nosso site). Caso seja utilizado um sistema de transporte é por conta do cliente.

Fabricado por: **BIOLAND TECHNOLOGY LTD.**

Importado e Distribuído por:

CONTROLLER – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Av. Santa Catarina, 1481 - CEP.: 88075-500 – Estreito - Florianópolis – SC

Fone/Fax: (48) 3248-2828 - e-mail: controller@controller-sc.com.br

CNPJ.: 78.515.210/0001-00 - www.controller-sc.com.br