



## CUIDADOS AO USAR

1. A plataforma ficara inoperante quando estiver molhada. Mantenha-a seca.
2. Mantenha-se parado quando estiver pesando.
3. **NUNCA bata ou deixe cair a balança.**
4. **Manipule a balança com muito cuidado porque é um instrumento de precisão.**
5. Limpe a balança com um pano macio e úmido e NUNCA deixe entrar água na parte interna da balança. JAMAIS utilize produtos químicos/abrasivos para efetuar limpeza.
6. Conservar a balança em local fresco e seco.
7. **Sempre conserve a balança na posição horizontal**
8. Se a balança falhar ao ligar, verificar se a bateria/pilha esta instalada ou se a bateria/pilha esta fraca. Insira ou troque as pilhas/bateria..
9. Se houver erro no visor ou não for possível desligar por um longo tempo, favor retirar as pilhas/bateria por aproximadamente 3 segundos, posteriormente instale outra vez para remover o problema. Se você não conseguir resolver o problema favor manter contato com o fornecedor ou a assistência técnica.
10. Não utilize a balança para fins comerciais.

09EB-002E R1

Importado por:



**CONTROLLER – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Av. Santa Catarina, 1481 - CEP.: 88075-500 – Estreito - Florianópolis – SC

Fone/Fax: (11) 4063-0023 - (31) 4063-9244 - (48) 3248-2828

E-mail: [bioland@controller-sc.com.br](mailto:bioland@controller-sc.com.br)

Site: [www.biolandbrasil.com.br](http://www.biolandbrasil.com.br)

CNPJ.: 78.515.210/0001-00



# BALANÇA ELETRÔNICA PESSOAL DE VIDRO

## INSTRUÇÕES DE USO

**Modelo: EB9015**




**SÉRIE EB9-4A**

## ■ BATERIA



**Bateria:** Bateria de lítio 1x3V (CR2032). Favor remover a folha de isolamento da bateria com o contato antes do uso.


## ■ TROCA DA BATERIA

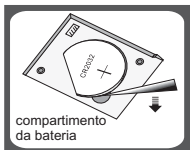

Abra a tampa do compartimento na parte de trás da balança.

- A.** Retire a bateria fraca, com ajuda de um objeto fino como apresentado.
- B.** Instale a nova bateria colocando um lado da bateria e pressionar o outro lado da bateria posteriormente.

## ■ OPERAÇÃO

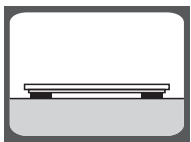


**Passo 1.** Para garantir a precisão, sempre coloque a balança em uma superfície plana e dura como madeira ou piso cerâmico (evite carpete ou superfície macia).




**Passo 2.** Suba na balança com cuidado (opera automaticamente). Mantenha-se imóvel sobre a balança aguardando que seu peso apareça no visor de forma estabilizada e definida. A unidade de medida utilizada será Kg.

## ■ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

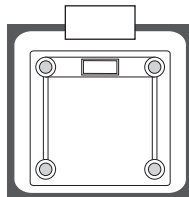

Quando você descer da balança, ela automaticamente desligará. Da mesma forma ela desligará se o visor apresentar o mesmo peso por aproximadamente 8 segundos.

## ■ INDICAÇÃO DE EXCESSO DE PESO

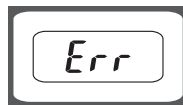

Indica o excesso de peso na balança (a capacidade máxima esta indicada na balança). Favor descer da balança para evitar danos no produto.

## ■ INDICAÇÃO DE EXCESSO DE PESO



Carga fraca da bateria. Favor trocar a bateria.

## ■ RE-PESAGEM



Quando você descer da balança e parecer no visor "L" significa que há erro na leitura do peso. Favor repetir a pesagem.

# GARANTIA

Controller Comércio e Serviços Ltda. dá a seguinte garantia ao comprador original do equipamento:

1. A Controller Comércio e Serviços Ltda garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação, com comprovação da nota fiscal de compra. Falhas do equipamento devido a utilização em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta Garantia.
2. Esta Garantia não inclui as baterias fornecidas com o equipamento.
3. Não desmonte o equipamento. Isso cancelará a garantia e fará o equipamento exibir falsos resultados.
4. Se a Controller Comércio e Serviços Ltda. receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente.
5. Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Controller Comércio e Serviços Ltda para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a Controller Comércio e Serviços Ltda ou ao canal de venda autorizado.

I